

# GLOBAL EQ

IMPLANT SYSTEM




Made in  
**100%  
ITALY**

BIOSAFIN

Partner of



Making Your Life Better.

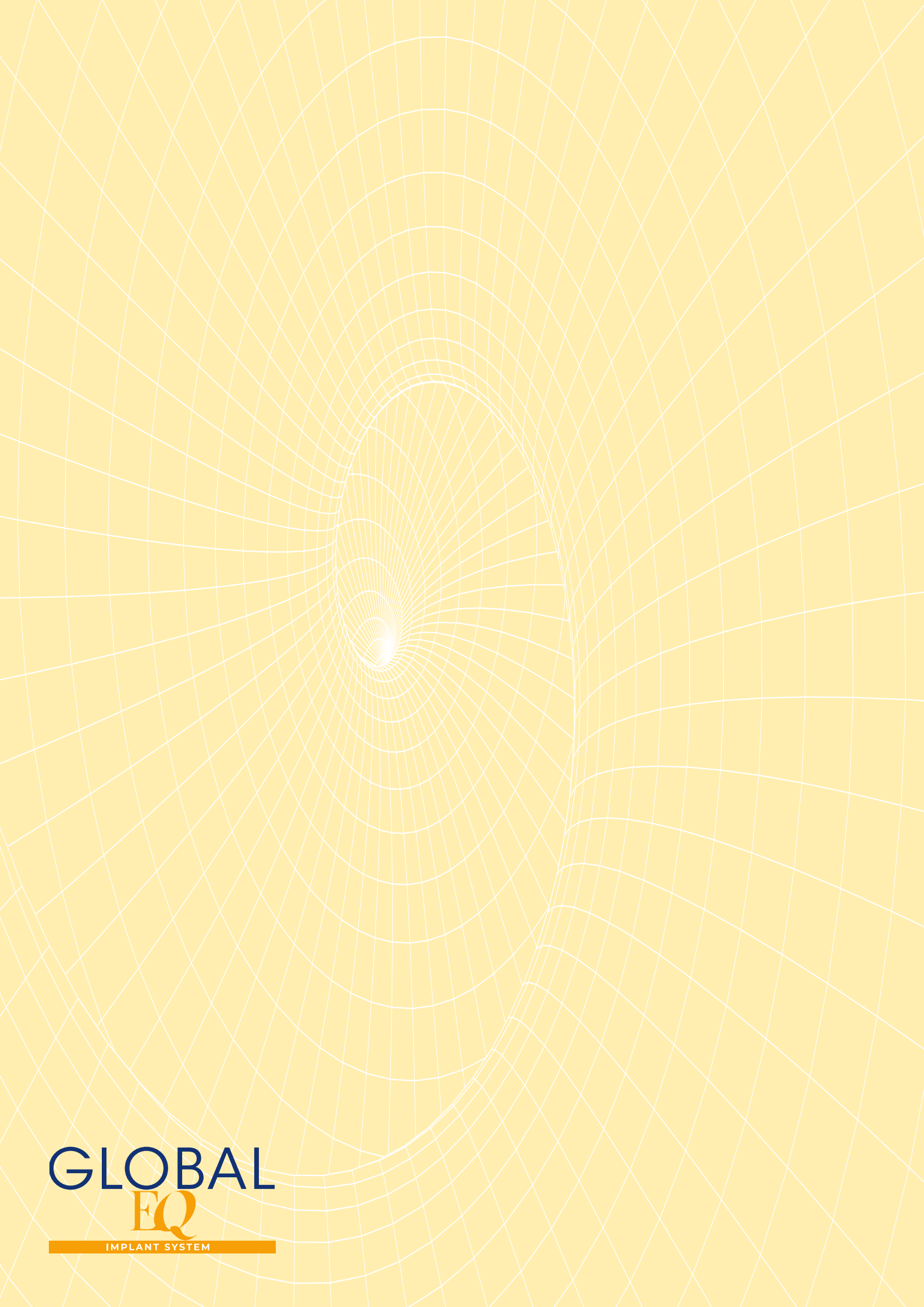

GLOBAL  
EQ  
IMPLANT SYSTEM



## ► UNICO KIT CHIRURGICO GLOBALWIN


Il Sistema Implantare GLOBALWIN - incluso l'impianto GLOBAL EQ è gestibile con un solo Kit Chirurgico, all'interno del quale sono collocati in sequenza d'utilizzo logica e chiara, le frese e tutti gli strumenti necessari alla fase chirurgica e protesica. Per il posizionamento dell'impianto EQ basta aggiungere al kit l'adattatore MMTREQ per MOUNTER da esagono interno.




### **Attacco MMTREQ**

## ► Micro Rough Surface applicata a tutti gli Impianti del Sistema GLOBAL EQ

- Presenta una morfologia rugosa, prodotta tramite un processo di sottrazione, per sabbatura e mordenatura del titanio.
- La speciale geometria tridimensionale della sua microstruttura consente una diminuzione dei tempi di osteointegrazione, tramite un processo di osteoconduzione favorito dalla peculiarità dello scaffold di questa superficie.

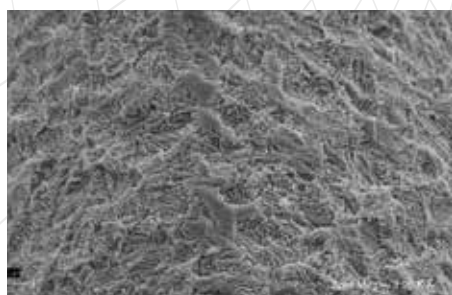

*MAG 721x: regolarità della superficie MRS*

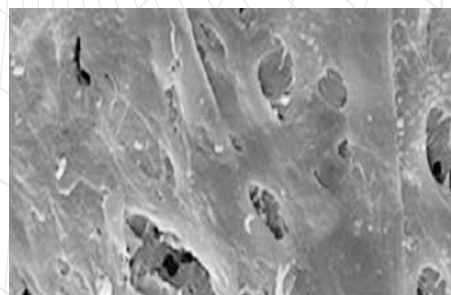

*Osso in attiva fase di rimodellamento sulla Superficie MRS*

GLOBAL EQ è stato progettato con l'obiettivo di consentire a un numero sempre maggiore di pazienti di accedere alle cure implantologiche. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo impianto one piece offre una soluzione per protesi mobile e fissa anche su impianti molto tiltati.

L'impianto GLOBAL EQ si inserisce nell'ampia gamma di soluzioni implantari di cui GLOBALWIN eredita l'ergonomia e la semplicità di preparazione grazie ad una gamma completa di frese ed accessori chirurgici. La sua superficie è la superficie MRS clinicamente testata su tutta la linea implantare esistente, la cui scientificità è dimostrata da innumerevoli pubblicazioni su riviste ad alto impatto nazionale ed internazionale.







## ANALISI DEI TESSUTI MOLLI IN BASE ALLE DIMENSIONI IMPLANTARI

Lo spessore dei tessuti molli è un fattore determinante nella scelta del corretto posizionamento endosseo dell'impianto. La porzione di 2 mm di titanio macchinato, situata sopra la superficie MRS®, funge da vero e proprio cuscinetto protettivo. Questa sezione è progettata per essere collocata nella zona corticale (Fig. 1) ed è studiata per favorire sia l'osteointegrazione (a distanza, e non per contatto), sia la stabilità dei tessuti molli circostanti.

Grazie a questa particolare configurazione, la porzione di titanio può essere gestita in modo differenziato a seconda delle esigenze cliniche, offrendo flessibilità nel trattamento (Fig. 2 e 3).

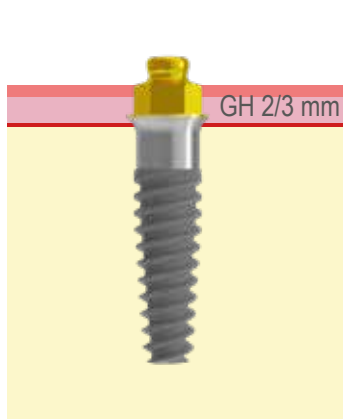


Fig. 1

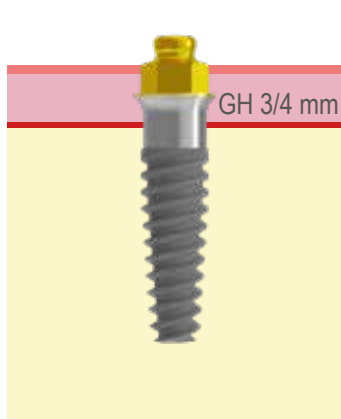


Fig. 2


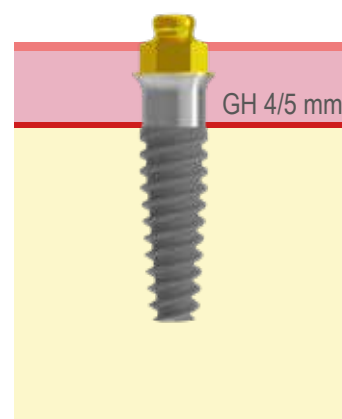


Fig. 3

La tecnologia dell'impianto GLOBAL EQ permette di protesizzare con protesi mobile e di colmare divergenze sino a 30° utilizzando il box tradizionale e fino a 50° utilizzando lo Smart box.

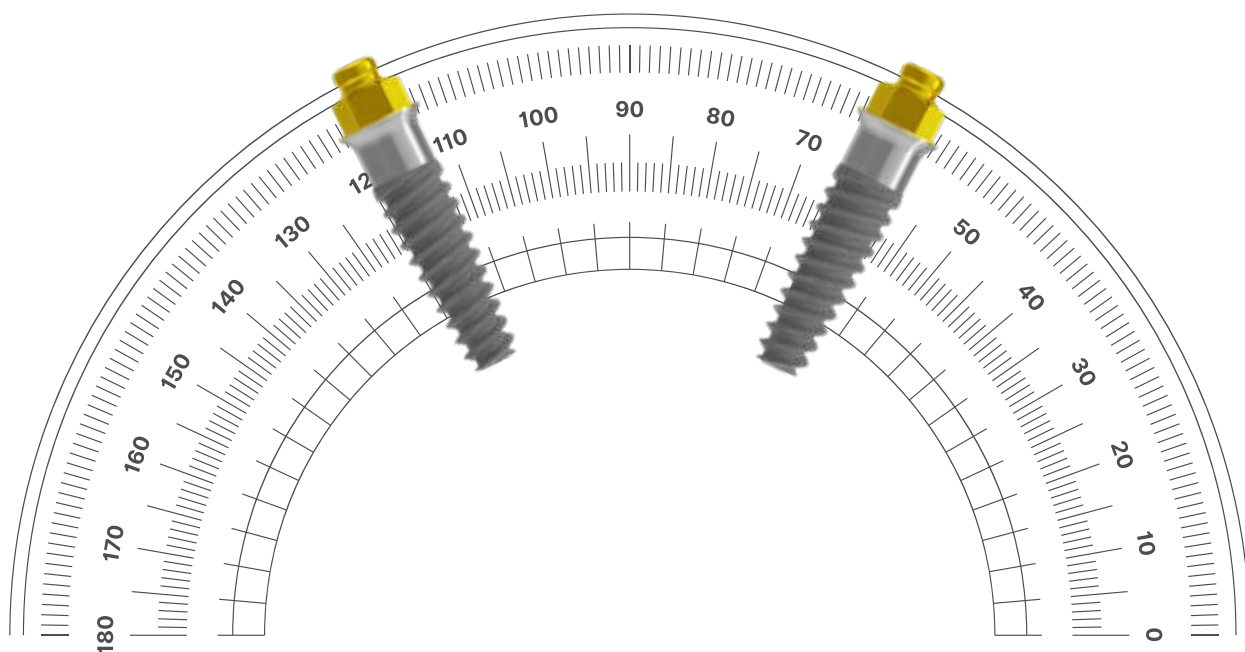

**COMPONENTI PROTESICHE  
E ACCESSORI PER OVERDENTURE**

**COMPONENTI PROTESICHE  
E ACCESSORI PER PROTESI FISSA**

**DT EQUATOR**

## COMPONENTI PROTESICHE E ACCESSORI PER OVERDENTURE



### KIT SMART BOX

**cod. 335SBC**

Assortimento cappette, contenitore Smart box e dischetto protettivo



### KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

**cod. 192ECE**


Assortimento cappette, contenitore e dischetto protettivo



### SPAZIATORE PER CONTENITORE

**cod. 161SCME**

OT Equator

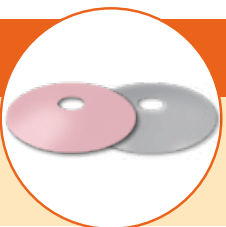

### DISCHETTI PROTETTIVI

**cod. 100PD**

10 Dischetti trasparenti

**Cod. 100PDR**

10 Dischetti rosa



### INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE

**cod. 487ICE**

OT Equator



### CONTENITORE DI CAPPETTE

**cod. 141CAE**


Acciaio inox



### CONTENITORE DI CAPPETTE

**cod. 141CTE**

Titanio

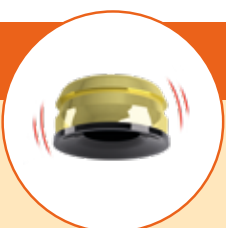

### CONTENITORE DI CAPPETTE SMARTBOX

**cod. 330SBE**

Con cappetta di posizionamento



### CAPPETTE SMARTBOX NERE

**cod. 335CSB**

Di posizionamento



### CAPPETTE VIOLA

**cod. 140CEV**

Forte - Tenuta in grammi: 2700g



### CAPPETTE BIANCHE TRASPARENTI

**cod. 140CET**

Standard - Tenuta in grammi: 1800g



### CAPPETTE ROSA

**cod. 140CER**

Soft  
Tenuta in grammi: 1200g



### CAPPETTE GIALLE

**cod. 140CEG**

Extra soft  
Tenuta in grammi: 600g



### CAPPETTE NERE


**cod. 140CEN**

Senza tenuta  
Esclusivamente per il laboratorio



## COMPONENTI PROTESICHE E ACCESSORI PER OVERDENTURE

# OT EQUATOR

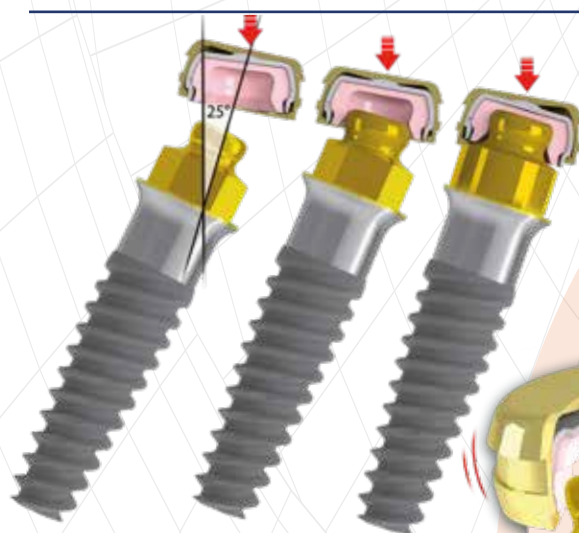

# Smart BOX

fulcro di rotazione

contenitore in titanio anodizzato

meccanismo basculante

cappetta ritentiva OT Equator

**Inserizione  
atraumatica**

**Corregge  
disparallelismi  
fino a 50°**

**Contenitore di cappette  
autoparallelizzante della  
linea OT Equator**

Le geometrie dell'attacco OT Equator insieme al contenitore di cappette tradizionale, permettono alla protesi una ritenzione superiore al tradizionale attacco sferico, correggendo divergenze fino a 15° tra gli impianti, senza intaccare il funzionamento delle cappette ritentive. Nei casi in cui le divergenze siano superiori ai 15° e entro i 25°, il sistema Smartbox è la soluzione ottimale.

# COMPONENTI PROTESICHE E ACCESSORI PER PROTESI FISSA



## MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE

**cod. MTSEG**  
Ø 3,5 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h 9,5 mm
- 1 VITE IN TITANIO h 2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



## MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

**cod. MMSEG**  
Ø 3,5 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h 5,7 mm
- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



## MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

**cod. MTSFEG**  
Ø 3,5 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO



## MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE

**cod. CMEG40C**  
Ø 4 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h 2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



## MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

**cod. CMTFP**  
h 1,8 mm

**cod. CMTB30FP**  
h 3 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5 mm)
- 1 VITE h 2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



## MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

**cod. MT40GL**  
Ø 4 mm

### CONFEZIONE CONTENENTE


- 1 MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h 9,5 mm Ø 4 mm
- 1 VITE h 2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



## VITI

**cod. VC**

VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h 2 mm

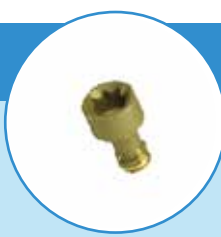

## VITI

**cod. 147VME**

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE (per cacciavite foro inclinato)



## VITI

**cod. 146VMI**

- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO (per cacciavite foro inclinato)



## VITI

**cod. 148VCM**

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI (per cacciavite foro inclinato)

**ACCESSORI E STRUMENTARIO  
PER OVERDENTURE E PROTESI FISSA**



## ACCESSORI E STRUMENTARIO PER OVERDENTURE E PROTESI FISSA



### ANALOGHI DA LABORATORIO

**cod. 144AE**

2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4 mm



### ANALOGHI DA LABORATORIO

**cod. 144AVC4**

**CONFEZIONE CONTENENTE**  
1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4 mm



### OT EQUATOR SCAN ABUTMENT

**cod. 145SAE**

1 OT Equator SCAN ABUTMENT + VITE



### VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

**cod. 159VAG**

h 1,8 mm

**CONFEZIONE CONTENENTE**  
1 VITE IN TITANIO  
1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



### TRANSFER DA IMPRONTA

**cod. 144TLE**

**CONFEZIONE CONTENENTE**  
1 TRANSFER LUNGO OT Equator IN TITANIO + VITE IN TITANIO h 11,5 mm



### TRANSFER PER IMPRONTA A STRAPPO

**cod. 044CAIN**

CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



### STRUMENTI

**cod. 760CE**

1 CACCIAVITE/STELO OT Equator PER MANIPOLO DINAMOMETRICO e per adattatore cricchetto dinamometrico predisposto per holder (QUADRATO 1,25 mm)



### STRUMENTI

**cod. 760CRD-US**

1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO per OT Equator Valore da 15 a 35 Ncm - Max 70 Ncm torque



### STRUMENTI

**cod. 760CSC**  
**cod. 760CS\***

\* nella versione lunga

1 CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (quadrato 1,25 mm) e per adattatore cricchetto dinamometrico



### STRUMENTI

**cod. 760ACC**

1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO (utilizzabile con cricchetto dinamometrico)



### STRUMENTI

**cod. 490IS**

INSERITORE/ESTRATTORE PER SEEGER PROTESI FISSA CON TESTER, MANICO E CUSTODIA



### STRUMENTI

**cod. 190IS**

1 INSERITORE E TESTER PER SEEGER PROTESI FISSA

**STRUMENTI E ACCESSORI CHIRURGICI  
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI  
WINSIX UNIQUE**

**GLOBAL**  
**EQ**

**IMPLANT SYSTEM**




# GLOBAL EQ


IMPLANT SYSTEM

## STRUMENTI E ACCESSORI CHIRURGICI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI GLOBAL EQ

La preparazione del sito implantare dell'impianto EQ segue il protocollo chirurgico già validato per la linea implantare GLOBALWIN
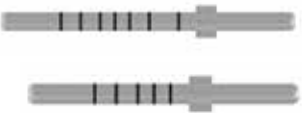
| ARTICOLO                                                                            | DESCRIZIONE                                                             | COD. ART. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Fresa lanciata                                                          | PRD       |
|    | Fresa iniziale Ø 2.00 mm L 5-18 mm                                      | STD1L     |
|   | Fresa lunga Ø 2.20/2.60 mm L 5-18 mm                                    | STD2L     |
|  | Fresa lunga Ø 2.60/3.00 mm L 5-18 mm                                    | STD3L     |
|  | Fresa lunga Ø 3.00/3.40 mm L 5-18 mm                                    | STD4L     |
|  | Fresa lunga Ø 3.40/3.80 mm L 5-18 mm                                    | STD5L     |
|  | Fresa lunga Ø 3.80/4.20 mm L 5-18 mm                                    | STD6L     |
|  | Fresa Corticale Ø 3.40 mm                                               | BP35      |
|  | Fresa Corticale Ø 3.65 mm                                               | BP37      |
|  | Fresa Corticale Ø 4.20 mm                                               | BP43      |
|  | Indicatore di direzione e profondità                                    | DIRS/DIRL |
|  | Avvitatore da contrangolo corto per impianti                            | HMTRS     |
|  | Carrier per impianto EQ per strumenti MTRS,MTRM, MTRL,HMTRS,HMTRM,HMTRL | MMTREQ*   |

\*unico strumento da acquistare per gli utilizzatori GLOBALWIN

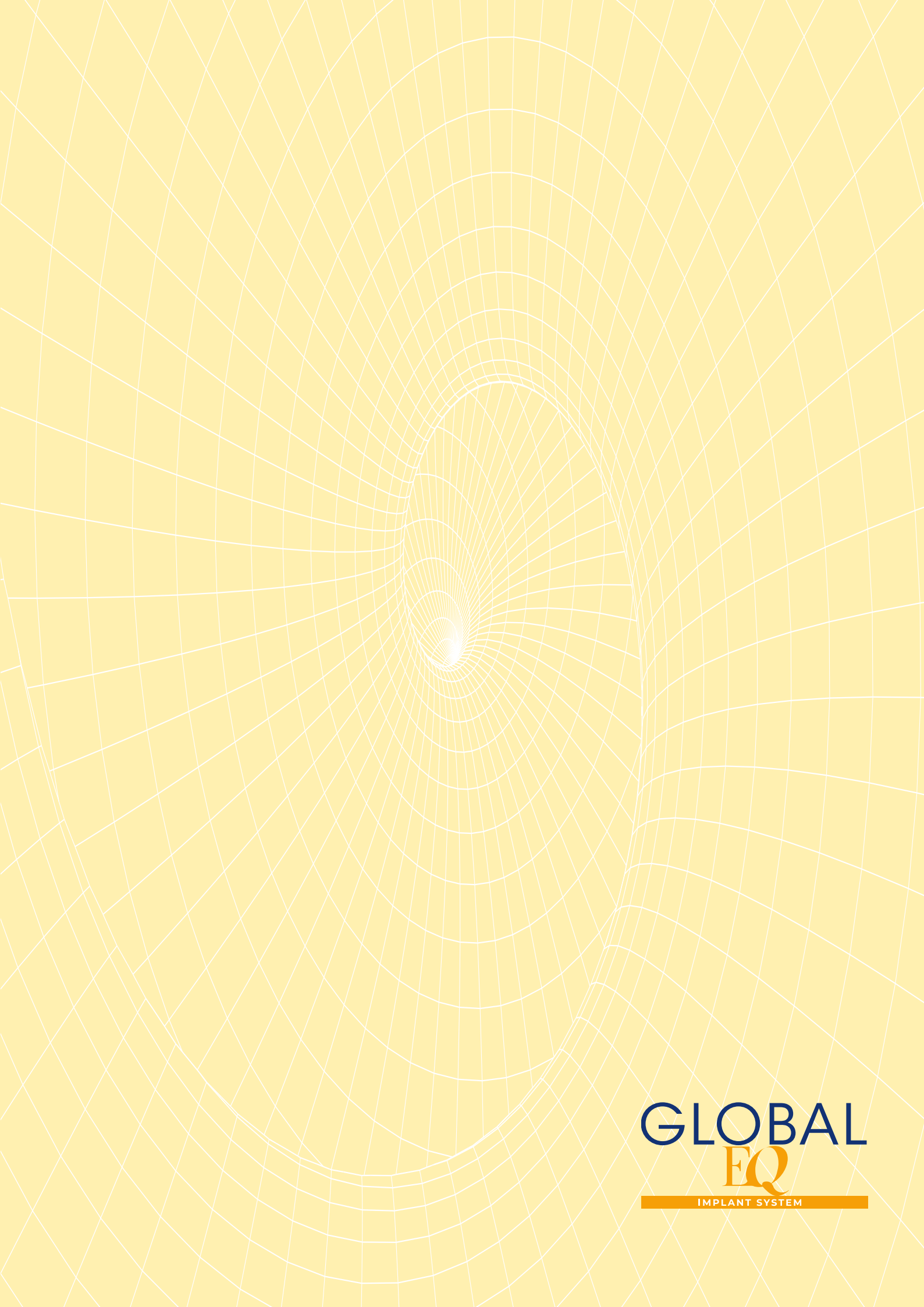

GLOBAL  
EQ  
IMPLANT SYSTEM



Partner of



Making Your Life Better.

## SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44  
20060 - Trezzano Rosa - Zona Industriale (MI)  
Tel. +39 02 90968692 - Fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G  
60131 - Ancona (AN)  
Tel. +39 071 2071897 - Fax +39 071 203261



**GLOBALWIN**  
I M P L A N T   S Y S T E M

[www.globalwin.eu](http://www.globalwin.eu)

BIOSAF IN è un'Azienda certificata:

ISO 9001 che certifica l'intero processo di lavoro a 360°  
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati  
ottimali, per la tutela dell'Utilizzatore del prodotto  
- il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente

ISO 13485 pertinente in modo specifico  
alla Qualità dei Dispositivi Medici.

Cod. ediz. 01 | ITA | V-2025